


# Withings Body Cardio

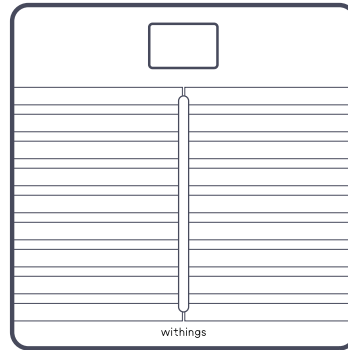

## QUICK INSTALLATION GUIDE

---

GUIDE D'INSTALLATION | INSTALLATIONSANLEITUNG | GUÍA DE INSTALACIÓN | GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

EN | FR | DE | ES | IT

# THANK YOU FOR CHOOSING THE WITHINGS BODY CARDIO


MERCI D'AVOIR CHOISI WITHINGS BODY CARDIO  
WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE WAHL ZUR WITHINGS BODY CARDIO  
TE AGRADECEMOS QUE HAYAS ELEGIDO WITHINGS BODY CARDIO  
GRAZIE PER AVER SCELTO WITHINGS BODY CARDIO

This guide is available in additional languages at: [www.withings.com/guides](http://www.withings.com/guides)


## Box contents

Contenu du coffret | Inhalt | Contenido de la caja | Contenuto della confezione

3

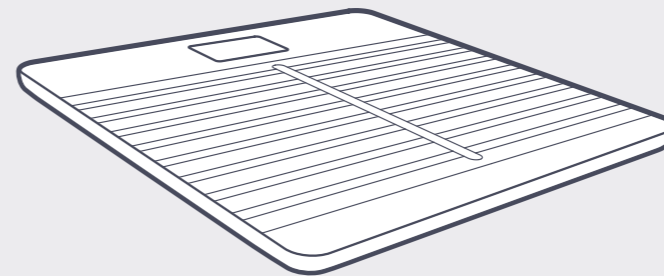

Withings Body Cardio

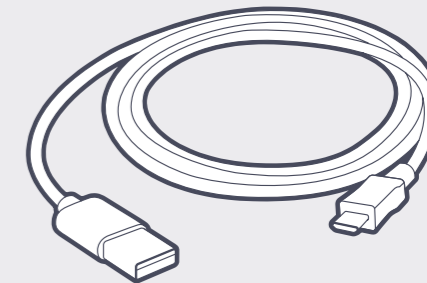

USB Cable

Câble USB | USB-Kabel | Cable USB | Cavo USB

### USB Cable

Câble USB | USB-Kabel | Cable USB | Cavo USB

**Connect the cable to a power source to charge your Body Cardio. Unplug the cable to weigh yourself again.**

**FR** Branchez votre câble à une source d'alimentation pour recharger votre Body Cardio. Débranchez le câble pour vous peser à nouveau.

**DE** Schließen Sie Ihr Kabel an eine Stromquelle an, um Ihren Body Cardio aufzuladen. Ziehen Sie das Kabel ab, um sich erneut zu wiegen.

**ES** Conecte su cable a una fuente de alimentación para cargar su Body Cardio. Desconecte el cable para volver a pesarse.

**IT** Collegare il cavo a una fonte di alimentazione per ricaricare il dispositivo Body Cardio. Scollegare il cavo per pesarsi di nuovo.



# Quick start

Démarrage rapide | Schnellstart | Inicio rápido | Avvio rapido

4-5

1


Press and hold the side button for a few seconds.

FR Appuyez quelques secondes sur le bouton latéral.

DE Drücken Sie den Knopf an der Seite einige Sekunden.

ES Pulse el botón al lado de la báscula unos segundos.

IT Tenere premuta la levetta laterale per qualche secondo.

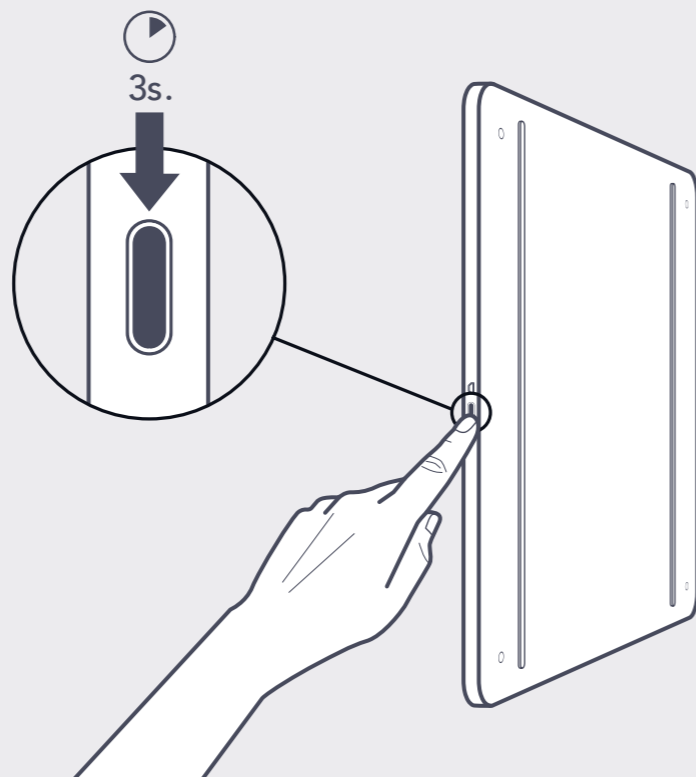

2

Visit [go.withings.com](https://go.withings.com) to get the app and follow the instructions.

FR Obtenez l'appli via [go.withings.com](https://go.withings.com) et suivez les instructions.

DE Holen Sie sich die App via [go.withings.com](https://go.withings.com) und folgen Sie den Anweisungen.

ES Visita [go.withings.com](https://go.withings.com) para conseguir la aplicación y sigue las instrucciones.

IT Scarica l'app [go.withings.com](https://go.withings.com) e segui le istruzioni



# Know more with Body Cardio

En savoir plus sur Body Cardio | Mehr über Body Cardio erfahren | Descubre Body Cardio | Scopri Body Cardio

6-7

Analyzes body composition and delivers standing heart rate, pulse wave velocity, and a daily local weather\* forecast.

FR Analyse de la composition corporelle, mesure du rythme cardiaque en position debout, vitesse d'onde de pouls et bulletin météo\* local.


DE Die Body Cardio analysiert die Körperzusammensetzung, misst die Pulswellengeschwindigkeit sowie die Herzfrequenz im Stehen und liefert täglich die lokale Wettervorhersage\*.

ES Analiza la composición corporal y proporciona información sobre la frecuencia cardíaca cuando uno está de pie, la velocidad de onda de pulso y el pronóstico meteorológico\* local diario.

IT Analizza la composizione corporea e fornisce la frequenza cardiaca in posizione eretta, la velocità dell'onda di polso, e previsioni del tempo\* locale quotidiane.

\*Only with Wi-Fi connection

Uniquement avec une connexion Wi-Fi | Nur mit WLAN-Verbindung | Solo con conexión Wi-Fi | Solo con la connessione Wi-Fi.

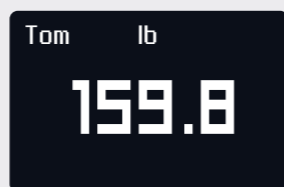



Weight (kg, lb, st lb)

FR Poids  
DE Gewicht  
ES Peso  
IT Peso



Fat Mass (%)

FR Masse grasse  
DE Körperfettanteil  
ES Masa grasa  
IT Massa grassa

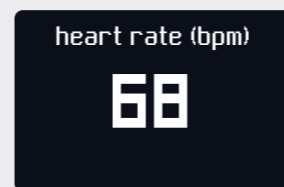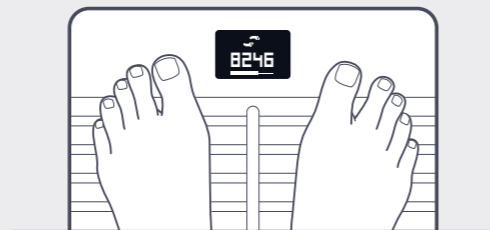


Heart Rate (bpm)

FR Fréquence cardiaque  
DE Herzfrequenz  
ES Frecuencia cardiaca  
IT Frequenza cardiaca



Muscle Mass (lb)

FR Masse musculaire  
DE Muskelmasse  
ES Masa muscular  
IT Massa muscolare

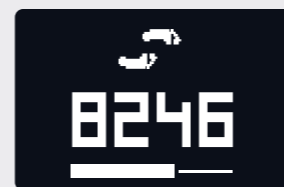

Number of steps\*

FR Nombre de pas  
DE Schrittzahl  
ES Número de pasos  
IT Numero di passi



Pulse Wave Velocity (m/s)

FR Vitesse d'onde de pouls  
DE Pulswellengeschwindigkeit  
ES Velocidad de onda de pulso  
IT Velocità dell'onda di polso



Weather\* (morning | afternoon, °C or °F)

FR Météo (matin | après-midi)  
DE Wetter (Vormittag | Nachmittag)  
ES Pronóstico meteorológico (mañana | tarde)  
IT Meteo (mattino | pomeriggio)



Total Body Water (%)

FR Masse hydrique  
DE Gesamtkörperwasser  
ES Masa hídrica  
IT Acqua corporea

# An eye on heart health

Suivez votre santé cardiovasculaire | Auf die Herzgesundheit achten


## Cardiovascular insights via Pulse Wave velocity estimation

Body Cardio gives you an indication of your overall cardiovascular health via Pulse Wave Velocity estimation, which is a medically-accepted measurement pointing to the speed of arterial blood flow.

Lifestyle changes such as a healthy diet and exercise, controlling blood pressure, diabetes, and managing cholesterol levels can help improve pulse wave velocity measurements, and consequently, your overall cardiovascular health.

Body Cardio does not make a medical diagnosis: it will tell you if the PWV estimation is normal for your age. As ever, if you have any concerns about your heart health, you should always consult with a physician.

**FR Indication de la forme cardiovasculaire par estimation de la vitesse d'onde de pouls.** Body Cardio est en mesure de vous indiquer votre santé cardiovasculaire générale, en passant par une estimation de votre vitesse d'onde de pouls. Il s'agit d'une mesure médicalement reconnue qui se rapporte à la rapidité du débit sanguin dans les artères. Un mode de vie plus sain, comme une meilleure alimentation et la pratique d'une activité physique, et le suivi régulier de la tension artérielle, du diabète et des niveaux de cholestérol, peuvent participer à l'amélioration des relevés de votre vitesse d'onde de pouls, et donc de votre santé cardiovasculaire. Body Cardio peut vous dire si l'estimation de votre vitesse d'onde de pouls est normale pour votre âge, mais n'est pas en mesure d'émettre un diagnostic médical. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur votre santé cardiovasculaire, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

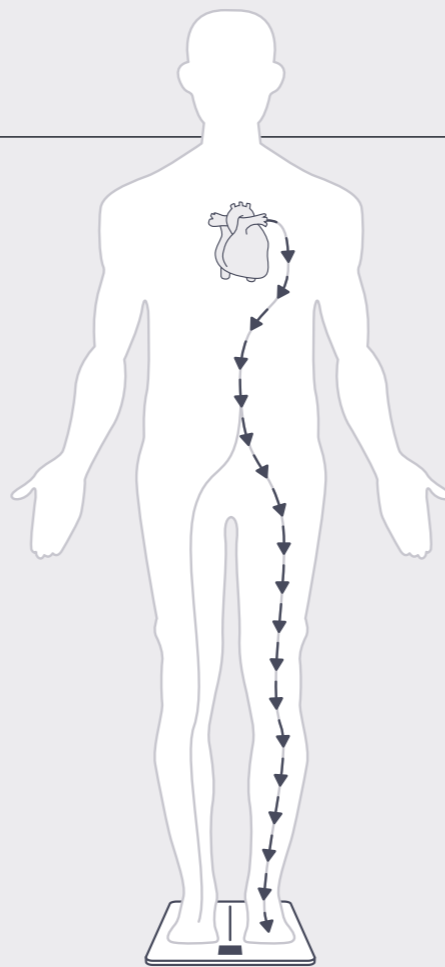

Un control sobre la salud cardiovascular | La salute del cuore sotto controllo

8 - 9

**DE Herz-Kreislauf-Daten durch Pulswellengeschwindigkeitsmessung.** Die Body Cardio gibt Ihnen einen Überblick über Ihre allgemeine Herz-Kreislauf-Fitness - basierend auf der Pulswellengeschwindigkeitsmessung, einer medizinisch anerkannten Messung, die die Geschwindigkeit der arteriellen Durchblutung berechnet. Die Änderung des Lebensstils, wie gesunde Ernährung, Bewegung und die regelmäßige Überwachung des Blutdrucks, des Cholesterinspiegels und von Diabetes, kann dazu beitragen, die Pulswellengeschwindigkeitswerte und damit Ihre allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Die Body Cardio stellt keine medizinische Diagnose, sie liefert allerdings Informationen darüber, ob das PWV-Ergebnis für Ihr Alter normal ist. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Herzgesundheit haben, sollten Sie sich grundsätzlich immer an Ihren Hausarzt wenden.

**ES Información sobre la salud cardiovascular obtenida mediante la medición de la velocidad de onda de pulso.** Body Cardio te ayuda a llevar un control sobre tu salud cardiovascular general a través de la medición de la velocidad de onda de pulso, un valor médicamente aceptado que indica cuál es la velocidad del flujo sanguíneo arterial. Los cambios en el estilo de vida, como el seguimiento de una dieta equilibrada, la práctica de ejercicio o llevar un control sobre la presión sanguínea, la diabetes o los niveles de colesterol, pueden tener un impacto positivo en los valores de medición de la velocidad de onda de pulso y, por consiguiente, en tu estado global de salud cardiovascular. Body Cardio no lleva a cabo un diagnóstico médico, pero sí te ayudará a saber si tu velocidad de onda de pulso es normal para tu edad. Como siempre, en caso de tener cualquier duda o preocupación sobre tu salud cardiovascular, te recomendamos que consultes a un médico.

**IT Indicazioni sulla salute cardiovascolare mediante stima della velocità dell'onda di polso.** Body Cardio consente di conoscere lo stato della tua salute cardiovascolare mediante la stima della velocità dell'onda di polso (PWV), un metodo di monitoraggio clinicamente riconosciuto che indica la velocità del flusso sanguigno arterioso. Cambiamenti nello stile di vita, come ad esempio una sana alimentazione e attività fisica, controllo della pressione sanguigna e del diabete, e gestione dei livelli di colesterolo, possono aiutare a migliorare il monitoraggio della velocità dell'onda di polso (PWV) e, di conseguenza, il quadro complessivo della salute cardiovascolare. Body Cardio non effettua una diagnosi medica, ma ti consente di sapere se la stima della PWV rientra nei valori normali per la tua fascia di età. Come di norma, per qualsiasi dubbio riguardo la tua salute cardiaca ti consigliamo di rivolgerti sempre al tuo medico di fiducia.

# Customize your screens

Personnalisez les écrans | Passen Sie die Bildschirme an | Personaliza las pantallas | Personalizza gli schermi

10-11

## Change the order of the screens and choose what matters most to you.

If you use a Withings watch, activity tracker or track your steps with the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much you walked the previous day!

FR Modifiez l'ordre des écrans et ne gardez que ceux qui sont essentiels pour vous.

Si vous utilisez une montre, tracker d'activité Withings ou suivez vos pas avec l'appli Health Mate™, activez l'écran de pas pour savoir combien de pas vous avez fait la veille!

DE Verändern Sie die Reihenfolge der Anzeigen und wählen Sie, was Ihnen am wichtigsten ist.




Wenn Sie einen Withings-Tracker verwenden oder Ihre Schritte mit der Health Mate App™ verfolgen, aktivieren Sie die Schritte-Anzeige, um zu wissen, wie viel Sie gestern gelaufen sind!

ES Cambia el orden de las pantallas y decide qué datos te interesan más.

Si utilizas un reloj, una pulsera de actividad Withings o aplicación Health Mate™, activa la pantalla Pasos para saber cuánto caminaste el día anterior!

IT Cambia l'ordine degli schermi e scegli cosa ti interessa

Se usi un orologio, un tracker d'attività Withings o registri i tuoi passi con l'app Health Mate™ attiva lo schermo Passi per sapere quanto hai camminato il giorno prima!

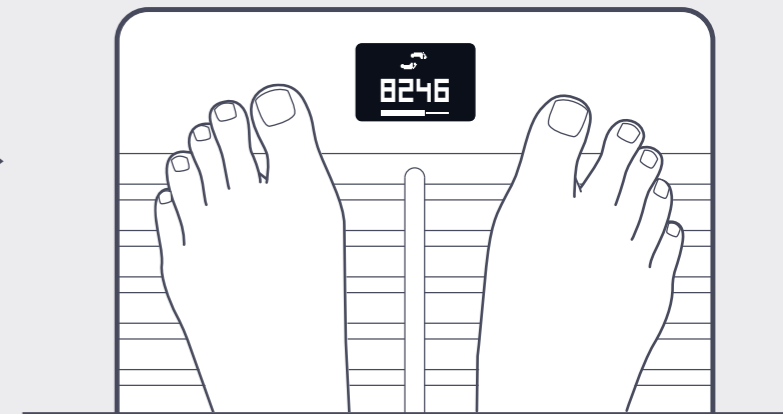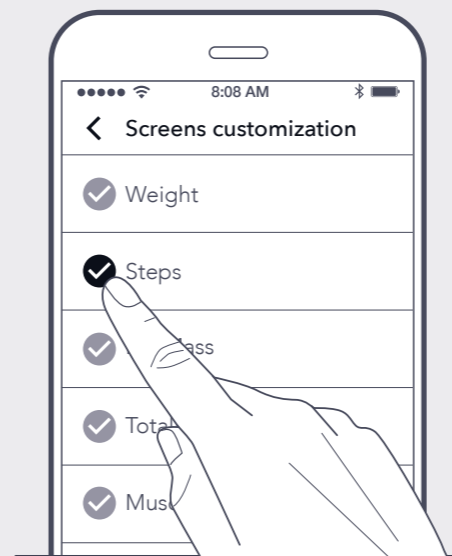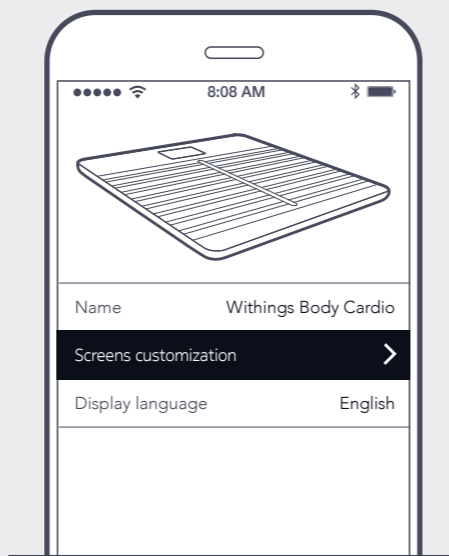


# Overview

Vue d'ensemble | Gesamtübersicht | Imagen general | Vista d'insieme

12

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>(A)</b> Screen     | <b>(D)</b> Micro USB Port            |
| FR Écran              | FR Micro USB                         |
| DE Display            | DE Micro USB                         |
| ES Pantalla           | ES Micro USB                         |
| IT Schermo            | IT Micro USB                         |
| <b>(B)</b> Electrodes | <b>(E)</b> Unit & Pairing button     |
| FR Électrodes         | FR Unités & Bouton d'appairage       |
| DE Elektroden         | DE Gewichtseinheiten & Pairing-Taste |
| ES Electrodos         | ES Unidad & Botón de emparejamiento  |
| IT Elettrodi          | IT Unità & Tasto accoppiamento       |
| <b>(C)</b> Feet       |                                      |
| FR Pieds              |                                      |
| DE Füße               |                                      |
| ES Pies               |                                      |
| IT Piedini            |                                      |

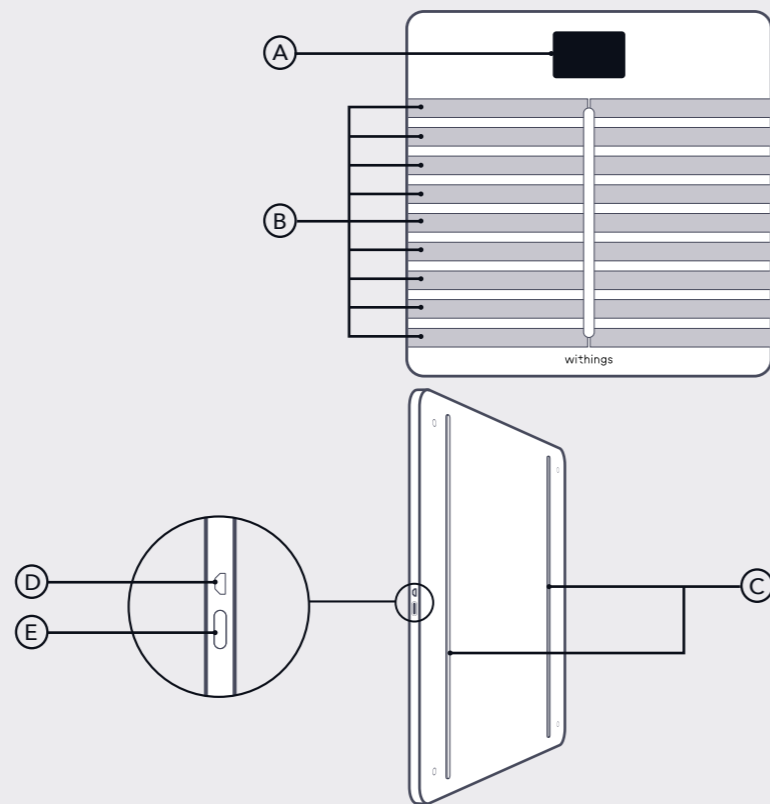

# Care and Maintenance

Conseils d'entretien | Tipps zur Wartung | Consejos de mantenimiento | Consigli di manutenzione

! 13


Use only a cloth dampened with water to clean your scale. The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the coating that protects the electrodes (B) used to measure your body fat and heart rate.

FR N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer votre balance, vous pourriez altérer le fonctionnement des électrodes (B) permettant de faire votre analyse corporelle.

DE Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Waage niemals ein Reinigungsmittel, denn dadurch könnte die Funktionsfähigkeit der Elektroden (B), die für die Ausführung der Körperanalyse nötig sind, beeinträchtigt werden.

ES No utilices detergentes para limpiar la báscula, podrían alterar el funcionamiento de los electrodos (B) utilizados en la medición de tu análisis corporal.

IT Non utilizzare mai detergenti per pulire la bilancia; potrebbe alterarsi il funzionamento degli elettrodi (B) che servono per la tua analisi del corpo.

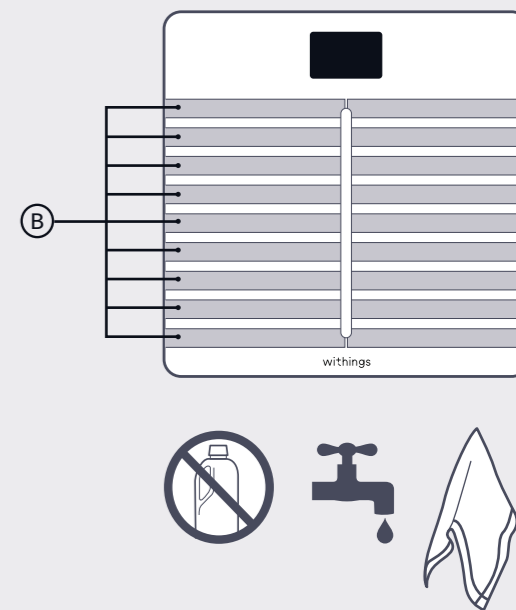

# Important notice

Conseils importants | Wichtige Hinweise | Consejos importantes | Suggerimenti importanti



**This product is not suitable for people wearing a pacemaker or any other internal medical device.**

- FR** N'utilisez pas ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical.
- DE** Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen.
- ES** Este producto no es adecuado para personas que llevan un marcapasos u otro aparato médico implantado.
- IT** Non utilizzare questo prodotto se porti uno stimolatore cardiaco o ogni altro dispositivo medico interno.

# Information to users in Canada

Information pour les utilisateurs au Canada

15

## IC ID: 11411A-WBS04

This device complies with Industry Canada's licence exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Radiation Exposure Statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

## IC ID: 11411A-WBS04

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

## Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.



# Warranty

Garantie | Garantie | Garantia | Garanzia

16

## US Withings™ Two (2) Years Limited Warranty - Withings Body Cardio

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, («Withings») warrants the Withings-branded hardware product («Withings Product») against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

## FR Garantie commerciale de Withings™ limitée à deux (2) ans - Withings Body Cardio

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Withings ») garantit le matériel de marque Withings («Produit Withings») contre les défauts de matériel et de main d'œuvre, lorsque celui-ci est utilisé conformément aux recommandations publiées sur le Produit Withings sous réserve qu'ils surviennent dans un délai de DEUX (2) ANS suivant la date d'achat initiale par l'utilisateur final du Produit Withings neuf auprès d'un professionnel. («Période de garantie»). Les recommandations publiées comprennent notamment les spécifications techniques, les consignes de sécurité ou les manuels d'utilisation du Produit Withings. Withings ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Withings sera ininterrompu ou sans erreur. Withings n'est pas responsable des dommages survenant en raison du non-respect des instructions d'utilisation du Produit Withings.

## DE Withings™ auf 2 Jahre begrenzte kommerzielle Garantie - Withings Body Cardio

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, («Withings») gewährleistet für einen Zeitraum von 2 JAHRE ab dem Datum des Ersterwerbs durch den Endnutzer («Garantiefrist»), dass das Material der Marke Withings («Withings-Produkte») frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorbehaltlich, dass das Gerät als Neuware und von einem professionellen Händler erworben wurde, wenn es unter normalen Bedingungen gemäß den von Withings veröffentlichten Anleitungen verwendet wird. Die von Withings veröffentlichten Anleitungen umfassen unter anderem die Informationen, die in den technischen Informationen, den Sicherheitsanweisungen und der Kurzanleitung enthalten sind. Withings garantiert keinen ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb des Withings-Produkts. Withings ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus der Nichtbefolgung der Anweisungen resultieren.

## ES Garantía comercial de limitada un (2) Años de Withings™ - Withings Body Cardio

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings") garantiza el material de la marca Withings («Producto Withings») contra los defectos de material y de mano de obra, siempre que se haya utilizado conforme a las recomendaciones publicadas sobre el Producto Withings y cuando los mismos aparezcan durante el periodo de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de compra inicial del Producto Withings nuevo en un distribuidor autorizado por el usuario final («Periodo de garantía»). Las recomendaciones publicadas por Withings incluyen las descripciones técnicas, las instrucciones de seguridad y los manuales del usuario. Withings no garantiza un funcionamiento del Producto Withings ininterrumpido o sin errores. Withings no se responsabiliza de los daños producidos por no haber seguido las instrucciones de utilización del Producto Withings.

## IT Garanzia commerciale di Withings™ limitata ad un (2) annos - Withings Body Cardio

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Withings ») garantisce il materiale della marca Withings («Prodotto Withings») contro i difetti materiali e di mano d'opera qualora questo venga utilizzato in conformità con le linee guida pubblicate per il Prodotto Withings a condizione che questi vengano riscontrati prima di 2 annos dalla data di acquisto del prodotto Withings da parte dell'acquirente finale presso un rivenditore («Periodo di Garanzia»). Le linee guida pubblicate riguardano le specifiche tecniche, le consegne di sicurezza o le istruzioni d'uso. Withings non può garantire che il funzionamento del prodotto Withings sarà interrotto o senza alcun errore. Withings non è responsabile dei danni derivanti dal non rispetto dell'istruzione d'utilizzo del prodotto Withings.



## Need help?

Besoin d'aide ? | Brauchen Sie Hilfe? | ¿Necesitas ayuda? | Ti serve aiuto?

➔ [withings.com/support/bodycardio](https://withings.com/support/bodycardio)

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
BT EDR	2402-2480	-0.21
BT LE	2402-2480	1
WLAN	2412-2472	9.98



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The crossed out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment. Such items should not be mixed with general household waste, and must be taken to dedicated collection points at the end of their working life for proper treatment, recovery and recycling. This way you help save valuable resources and promote recycling of materials.

**EN** Withings SA hereby declares that the device Withings Body Cardio is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance) | **FR** Par la présente, Withings SA déclare que l'appareil Withings Body Cardio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance) | **DE** Hiermit erklärt Withings SA, dass sich das Gerät Withings Body Cardio den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EG-Konformitätserklärung können Sie über das Internet herunterladen: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance) | **ES** Por la presente, Withings SA declara que el WithingsBody Cardio cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad se puede encontrar en: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance) | **IT** Con la presente Withings SA dichiara che questo Withings Body Cardio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: [withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)

withings

Withings Body Cardio | Heart health & Body Composition Wi-Fi Scale  
© 2018 Withings SA. All rights reserved.