

WELCOME TO THE COMMUNITY




BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ | WILLKOMMEN IN DER COMMUNITY | BIENVENIDO A LA COMUNIDAD

GET STARTED COMMENCER | ERSTE SCHRITTE | EMPEZAR



- 1
- 2
- 3

YOUR BEAMO VOTRE BEAMO | IHRE BEAMO | SU BEAMO

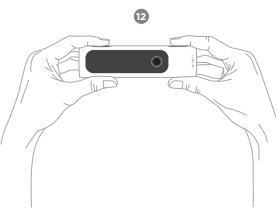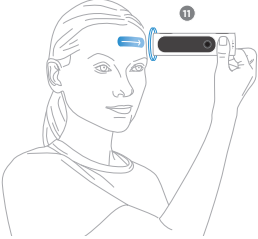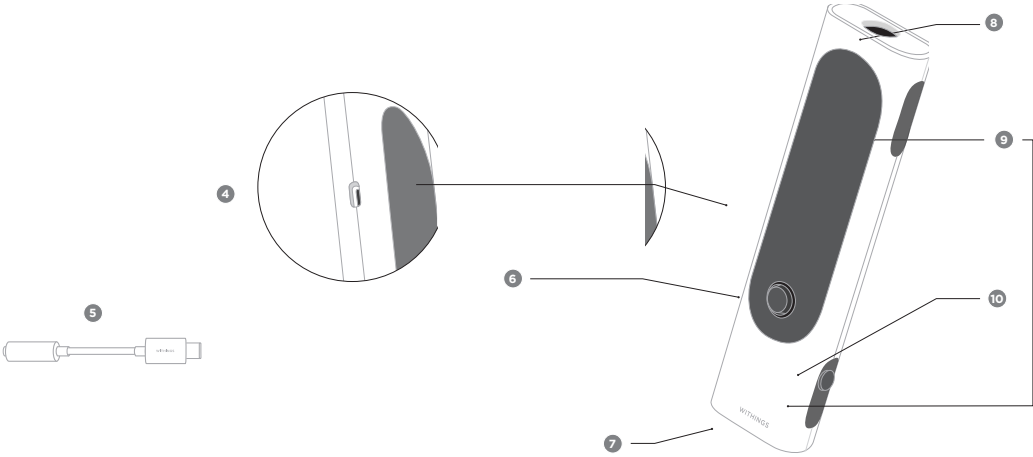

WITHINGS | BEAMO

EN FR DE ES



DISCOVER OUR DEVICES

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS CONNECTÉS | ENTDECKEN SIE UNSERE GESUNDHEITSGERÄTE | DESCUBRA NUESTROS DISPOSITIVOS



withings.com

ANK_ORIG_SCT002_INT_02
Septembre 2019

FR
BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTE
COMMENCER

- 1 Téléchargez l'application Withings
- 2 Créez votre compte
- 3 Rendez-vous dans "Appareils" et procédez à l'installation

VOTRE BEAMO

- 4 Port USB-C: pour la charge et l'audio
 - 5 Adaptateur USB-C vers audio jack
 - 6 Bouton
 - 7 Stéthoscope digital
 - 8 Thermomètre sans contact
 - 9 Electrocardiogramme à une dérivation
 - 10 Capteur de SpO2
- Reservez hors États-Unis uniquement

THERMOMETER

Scannez lentement depuis l'axe du front vers la tempe

ECG ET SPO2

Posez vos doigts sur les électrodes

STETHOSCOPE

Ne pas bouger ni parler
Maintenez l'appareil immobile contre le corps

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS CONNECTÉS
withings.com

DE
WILLKOMMEN IN DER COMMUNITY
ERSTE SCHRITTE

- 1 Laden Sie die Withings-App herunter
- 2 Erstellen Sie ein Konto
- 3 Gehen Sie zu „Geräte“ und folgen Sie bitte der Installationsanleitung

IHRE BEAMO

- 4 USB-C-Anschluss: zum Aufladen und für Audio
 - 5 USB-C auf Audio-Adapter
 - 6 Taste
 - 7 Digitales Stethoskop
 - 8 Kontaktloses Thermometer
 - 9 1-Kanal-Elektrokardiogramm
 - 10 SpO2-Sensor
- Nur Regionen außerhalb der USA

THERMOMETER

Scannen Sie langsam von der Mitte der Stirn zur Schläfe

EKG UND SPO2

Legen Sie Ihre Finger auf die Elektroden

STETHOSKOP

Ohne sich zu bewegen oder zu sprechen
Halten Sie das Gerät ruhig am Körper

ENTDECKEN SIE UNSERE GESUNDHEITSGERÄTE
withings.com

ES
BIENVENIDO A LA COMUNIDAD
EMPEZAR

- 1 Descarga la aplicación Withings
- 2 Crear una cuenta
- 3 Vaya a "Dispositivos" y siga instrucciones de instalación

SU BEAMO

- 4 Puerto USB-C: para cargar y para audio
 - 5 Adaptador de USB-C a jack de audio
 - 6 Botón
 - 7 Estetoscopio digital
 - 8 Termómetro sin contacto
 - 9 Electrocardiograma de 1 derivación
 - 10 Sensor SpO2
- Solo regiones fuera de EE. UU.

TERMÓMETRO

Escanee lentamente desde el centro de la frente hasta la sien

ECG Y SPO2

Ponga sus dedos en los electrodos

ESTETOSCOPIO

No se mueva ni hable
Mantenga el dispositivo inmóvil cerca del cuerpo

DESCUBRA NUESTROS DISPOSITIVOS
withings.com

DA
VELKOMMEN TIL NETVÆRKET
KOM I GANG

- 1 Download Withings-appen
- 2 Opret en konto
- 3 Gå til «Enheder», og følg installationsinstruktionerne

DIN BEAMO

- 4 USB C-port til opladning og lyd
 - 5 Adapter USB C til lydkabler
 - 6 Knap
 - 7 Digitalt stetoskop
 - 8 Kontaktløst termometer
 - 9 Elektrokardiogram med 1 afledning
 - 10 SpO2-sensor
- Kun regioner uden for USA

TERMOMETER

Scan langsomt fra midten af panden til tindingen

ECG OG SPO2

Lad fingrene hvile på elektroderne

STETOSKOP

Lad være med at bevæge dig eller tale
Hold enheden stabilt mod kroppen

GÅ PÅ OPDAGELSE I VORES ENHEDER
withings.com

BG
ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩНОСТТА
НАЧАЛО

- 1 Изтеглете приложението Withings
- 2 Създаване на акаунт
- 3 Отидете на „Устройства“ и следвайте инструкциите за инсталиране

ВАШИЯТ БЕАМО

- 4 USB C порт за зареждане и аудио
 - 5 Адаптер USB C към аудио жак
 - 6 Бутон
 - 7 Дигитален стетоскоп
 - 8 Безконтактен термометър
 - 9 1-канална електрокардиограма
 - 10 Датчик за SpO2
- Само региони извън САЩ

ТЕРМОМЕТЪРЪ

Сканирайте бавно от центъра на челото до слепоочието

ЕКГ И SPO2

Поставете пръстите си върху електродите.

СТЕТОСКОП

Не се движете и не говорете
Придържайте устройството стабилно към тялото

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ УСТРОЙСТВА
withings.com

CS
VÍTEJTE V KOMUNITĚ
JDEME NA TO

- 1 Stáhněte si aplikaci Withings
- 2 Vytvořit účet
- 3 Přejděte do části „Zařízení“ a postupujte podle pokynů k instalaci

VAŠE BEAMO

- 4 Port USB C pro nabíjení a zvuk
 - 5 Adaptér USB-C na audio jack
 - 6 Tlačítko
 - 7 Digitální stetoskop
 - 8 Bezkontaktní teploměr
 - 9 Išvodový elektrokardiogram
 - 10 Senzor SpO2
- Pouze regiony mimo USA

TEPLOMĚŘ

Snímejte pomalu od středu čela směrem k spánku

EKG A SPO2

Položte prsty na elektrody

STETOSKOP

Nehýbejte se ani nemluvte
Držte zařízení pevně proti tělu

OBJEVTE NAŠE ZAŘÍZENÍ
withings.com

FI
VELKOMMEN TIL NETVÆRKET
KOM I GANG

- 1 Download Withings-appen
- 2 Opret en konto
- 3 Gå til «Enheder», og følg installationsinstruktionerne

DIN BEAMO

- 4 USB C-port til opladning og lyd
 - 5 Adapter USB C til lydkabler
 - 6 Knap
 - 7 Digitalt stetoskop
 - 8 Kontaktløst termometer
 - 9 Elektrokardiogram med 1 afledning
 - 10 SpO2-sensor
- Kun regioner uden for USA

TERMOMETER

Scan langsomt fra midten af panden til tindingen

ECG OG SPO2

Lad fingrene hvile på elektroderne

STETOSKOP

Lad være med at bevæge dig eller tale
Hold enheden stadigt mod kroppen

SE ALLE PRODUKTENE VÅRE
withings.com

PL
WITAMY W SPOŁECZNOŚCI
PIERWSZE KROKI

- 1 Pobierz aplikację Withings
- 2 Utwórz konto
- 3 Przejdź do „Urządzeń” i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji

TWOJE BEAMO

- 4 Port USB C do ładowania i podłączenia źródła dźwięku
 - 5 Adapter USB C do gniazdka słuchawkowego
 - 6 Przycisk
 - 7 Stetoskop cyfrowy
 - 8 Termometr bezdotykowy
 - 9 Termometr bezdotykowy
 - 10 Czujnik SpO2
- Kun regioner utenfor USA

TERMOMETR

Powoli zeskanuj obszar od środka czoła do skroni

EKG I SPO2

Umieść palce na elektrodach

STETOSKOP

Nie ruszaj się i nie mów
Utrzymuj niezmienną odległość od ciała

POZNAJ NASZE URZĄDZENIA
withings.com

PT
BEM-VINDO(A) À COMUNIDADE
INTRODUÇÃO

- 1 Descarregue a aplicação da Withings
- 2 Crie uma conta
- 3 Vá para «Dispositivos» e siga as instruções de instalação

O SEU BEAMO

- 4 Porta USB C para carregamento e áudio
 - 5 Adaptador USB C para cabo de áudio
 - 6 Botão
 - 7 Estetoscópio digital
 - 8 Termómetro sem contacto
 - 9 Electrocardiograma de uma derivação
 - 10 Sensor SpO2
- Tylko regiony poza USA

TERMÓMETRO

Passa o dispositivo desde o centro da testa à têmpora

ECG E SPO2

Pouse os dedos nos elétrodos

ESTETOSÓPIO

Não se mova nem fale
Mantenha o dispositivo imóvel sobre o corpo

CONHEÇA OS NOSSOS DISPOSITIVOS
withings.com

RO
BUN VENIT ÎN COMUNITATE
ÎNCEPEȚI

- 1 Descărcați aplicația Withings
- 2 Creați un cont
- 3 Apăscați „Dispozitive” și urmați instrucțiunile de instalare

DISPOZITIVUL DVS. BEAMO

- 4 Port USB C pentru audio și încărcare
 - 5 Adaptor USB C pentru mufă audio
 - 6 Buton
 - 7 Stetoscop digital
 - 8 Termometru fără contact
 - 9 Electrocardiogramă cu 1 derivație
 - 10 Senzor SpO2
- Apenas regiões não-EUA

TERMOMETRU

Scanați încet dinspre centrul frunții spre temple

ECG ȘI SPO2

Așezați degetele arătătoare pe electrozi

STETOSKOP

Nu vă mișcați și nu vorbiți
Mențineți dispozitivul nemișcat pe corp

DESCOPIREȚI DISPOZITIVELE NOASTRE
withings.com

SV
VÄLKOMMEN TILL COMMUNITYN
KOM IGÅNG

- 1 Ladda hem Withings-appen
- 2 Skapa ett konto
- 3 Gå till «Enheter» och följ installationsinstruktionerna

DIN BEAMO

- 4 USB C-port för laddning och ljud
 - 5 Adapter USB C till ljudkontakt
 - 6 Knapp
 - 7 Digitalt stetoskop
 - 8 Kontaktlös termometer
 - 9 Elektrokardiogram med 1 avledning
 - 10 SpO2-sensor
- Samo regije zunaj ZDA

TERMOMETER

Skanna långsamt från pannans mitt till tinningen

EKG OCH SPO2

Lägg fingrarna på elektroderna

STETOSKOP

Var stilla och tyst
Håll apparaten stadigt mot kroppen

KOLLA IN VÅRA ENHETER
withings.com

TK
TOPLULUĞA HOŞ GELDİNİZ
BAŞLANGIÇ

- 1 Withings uygulamasını indirin
- 2 Hesap oluşturun
- 3 "Devices" (Cihazlar) kısmına gidin ve kurulum talimatlarını takip edin

BEAMO CİHAZINIZ

- 4 Şarj ve ses için USB-C portu
 - 5 USB-C'den jaka dönüştürücü
 - 6 Düğme
 - 7 Dijital stetoskop
 - 8 Temassız ateşölçer
 - 9 1-derivasyonlu elektrokardiogram
 - 10 SpO2 sensörü
- Endast regioner utanför USA

ATEŞÖLÇER

Alın ortasından şakağa doğru yavaşça tarayın

EKG VE SPO2

Parmaklarınızı elektrotların üzerine yerleştirin

STETOSKOP

Hareket etmeyin ve konuşmayın
Cihazı vücudunuzun karşısında sabit tutun

CİHAZLARIMIZI KEŞFEDİN
withings.com

IT
TI DIAMO IL BENvenuto NELLA
COMMUNITY
PER INIZIARE

- 1 Scarica l'app Withings
- 2 Crea un account
- 3 Seleziona «Dispositivi» e segui le istruzioni di installazione

IL TUO BEAMO

- 4 Porta USB C per ricarica e audio
 - 5 Adattatore da USB C a jack audio
 - 6 Pulsante
 - 7 Stetoscopio digitale
 - 8 Termometro contactless
 - 9 Elettrocardiogramma a 1 derivazione
 - 10 Sensore SpO2
- Sadece ABD dışı bölgeler

TERMOMETRO

Scansiona lentamente la fronte dal centro fino alla tempia

ECG E SPO2

Posiziona le dita sugli elettrodi

STETOSCOPIO

Non muoverli o parlare
Mantieni fermo il dispositivo sul corpo

SCOPRI I NOSTRI DISPOSITIVI
withings.com