

EN
FR
DE

WITHINGS

PRODUCT GUIDE

INSTRUCTIONS FOR USE

EN – US & NON-US REGIONS

Content

3

INTRODUCTION

Important notice

DISCLAIMER

About the Withings U-Scan Nutrio Cartridge

Warnings & safety notice

Chemistry performance

Interferences

4

4

4

4

5

6

6

THE WITHINGS U-SCAN NUTRIO CARTRIDGE

7

Overview

7

Content of the Withings U-Scan Nutrio Cartridge
packaging

7

Set-Up Process and Maintenance

8

1. Cartridge installation

8

2. Changing the Cartridge

9

3. Cartridge Lifespan

9

GENERAL INFORMATION

12

Technical specifications

12

European Union – Declarations

of Conformity

12

Warranty

13

Security

13

Equipment symbol description

14

EN

Introduction

Important notice

Thank you for choosing Withings U-Scan. Before using Withings U-Scan Nutrio Cartridge, review the information in this guide. You may also find this guide online at <https://www.withings.com/guides>. Retain this documentation for future reference. Installation instructions are available within the Quick Start Guide provided alongside this Product Guide. Please contact Withings when in need of assistance for setting up, using or maintaining the device or to report unexpected operations or events.

For more information on the Withings U-Scan System, please refer to the Withings U-Scan Reader Product Guide.

Please note that Withings U-Scan Nutrio Cartridge is a wellness product. Withings U-Scan Nutrio Cartridge is not a medical device, and is not intended for use in the diagnosis of disease or conditions or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease.

Disclaimer

Information in this guide may change without notice. You will need an iOS (16.0 or higher) or Android (9.0 and higher) tablet or smartphone to install your Withings U-Scan Nutrio Cartridge. It should be noted that it is possible to launch a measurement without a mobile device, the use of a mobile device is required for the installation of

the Withings U-Scan System, and to synchronise and consult your results.

About the Withings U-Scan Nutrio Cartridge

The Withings U-Scan Nutrio Cartridge is a consumable component (cartridge) within the U-Scan System and works in tandem with the application (Withings App) and the U-Scan Reader. The Nutrio Cartridge will use the evolution of certain urinary parameters (pH, Ketones, Vitamin C and Specific Gravity) to provide you with personalized recommendations in terms of nutrition and sports activities. Please note that the Withings U-Scan System, needs all components (the Withings U-Scan Reader and a Withings U-Scan Nutrio Cartridge) to complete the urine analysis. If you have any questions related to the set-up, maintenance and use of the Withings U-Scan Reader, please check in the manual guide of the Withings U-Scan Reader.

Disclaimer

Warnings & safety notice

Before using this equipment, be sure to read this manual carefully.

Withings U-Scan Nutrio Cartridge is not a medical device, and is not intended for use in the diagnosis of disease or conditions or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease. Self-diagnosis and self-treatment can be dangerous. Always consult your doctor in case of questions or doubts.

- U-Scan Nutrio pH measurements can only be used for self-tracking purposes, it can't be used for diagnosis of any disease or condition including clinical dehydration, kidney disease, diabetes, any deficiency or any other disease and conditions. U-Scan Nutrio pH measurements are not intended for medical use, including self-diagnosis or consultation with a doctor, and are only designed for general fitness and wellness purposes.
- U-Scan Nutrio Specific Gravity measurements can only be used for self-tracking purposes, it can't be used for diagnosis of any disease or condition including clinical dehydration, kidney disease, diabetes, any deficiency or any other disease and conditions. U-Scan Nutrio Specific Gravity measurements are not intended for medical use, including self-diagnosis or consultation with a doctor, and are only designed for general fitness and wellness purposes. If you suspect clinical dehydration, please consult your healthcare provider as U-Scan Nutrio is not a diagnostic tool for clinical hydration status.
- U-Scan Nutrio Vitamin C measurements can only

be used for self-tracking purposes it can't be used for diagnosis of any disease or condition including clinical dehydration, kidney disease, diabetes, any deficiency or any other disease and conditions. U-Scan Nutrio Vitamin C measurements are not intended for medical use, including self-diagnosis or consultation with a doctor, and are only designed for general fitness and wellness purposes.

- U-Scan Nutrio Ketone levels can only be used for self-tracking purposes, it can't be used for diagnosis of any disease or condition including clinical dehydration, kidney disease, diabetes, any deficiency or any other disease and conditions. U-Scan Nutrio measurements are not intended for medical use, including self-diagnosis or consultation with a doctor, and are only designed for general fitness and wellness purposes.
- Withings U-Scan Nutrio Cartridges are only compatible with Withings U-Scan Reader.
- The data provided is for informational purposes only, and is not intended to replace the results of laboratory medical analysis tests.
- This cartridge is intended for adults only.
- Samples to be used with the Withings U-Scan Nutrio Cartridges are exclusively human urine.
- Do not use if you observe that the packaging is damaged / cracked. Use of a damaged product could cause injury or equipment failure.
- Follow the operational and storage conditions indicated in the technical specifications section of this manual. Otherwise, measurement accuracy may be impacted.

- Do not use accessories, detachable parts, or materials that are not described in this guide.
- Certain substances or intakes can affect the accuracy of the results. Check the Interfering molecules part of this manual for more information.
- Discard the Withings U-Scan Nutrio Cartridges 90 days after opening
- Do not install or use the Withings U-Scan Nutrio Cartridges after expiry date. Check the expiry date on the aluminium pouch of the cartridge or on the packaging box of the cartridge.
- Do not expose the Withings U-Scan Nutrio Cartridge to humidity
- A cleaning detergent is provided within the cartridge packaging. Please check the security guidelines before using.
- The cleaning detergent is only intended to be used with the U-Scan station.
- Do not use this product during menstruation or if there is blood in your urine.

Chemistry performance

Please check the performance on our website with this link

<https://support.withings.com/hc/articles/27579993272849>

Interferences

The consumption of the following exogenous substances can lead to false positive results for either vitamin C and/or ketones due to their high pigmentation. Phenazopyridine, Captopril and Riflovin will tend to overestimate vitamin C levels, whereas Captopril and Nitrofurantoin may lead to an overestimation of ketone levels.

In case of behaviors known to increase creatinine, bilirubin or blood concentration in urine, U-scan should not be used because the results won't be accurate. This includes menstruation and intensive workout leading to extreme muscle weight gain.

pH values above 7.5 can lead to an underestimation of the fluid intake level.


Acetic acid, citric acid and sodium hypochlorite should never be used to clean U-Scan reader and if used to clean the toilet bowl, the latter should be thoroughly rinsed with water before putting back the U-scan reader.

The Withings U-Scan Nutrio Cartridge | Overview

Content of the Withings U-Scan Nutrio Cartridge packaging.

The Withings U-Scan Nutrio Cartridge packaging includes the following components. If something is missing, please contact us at support.withings.com

U-SCAN CARTRIDGE Box content

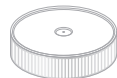

Withings U-Scan Cartridge



Protective gloves



Cleaning powder



Product guide




Setup Process and Maintenance

EN

1. Cartridge installation

To install the cartridge, you can launch the cartridge installation process from your Withings app and follow these steps:

1. Make sure your Withings U-Scan Reader is opened.
2. Remove your Withings U-Scan Nutrio Cartridge from its packaging and insert the Cartridge into the Reader.
3. While gently pushing down, rotate the Cartridge in either direction until you feel it lock in place with the Reader.
4. The indicator light will change from blue to green to confirm that the Cartridge has been activated.
5. To close the device, hold it in your palm with the smooth side facing up and place the Reader cover on top. Then turn the Reader cover clockwise. The Withings U-Scan Nutrio Cartridge is now properly installed in the Reader.

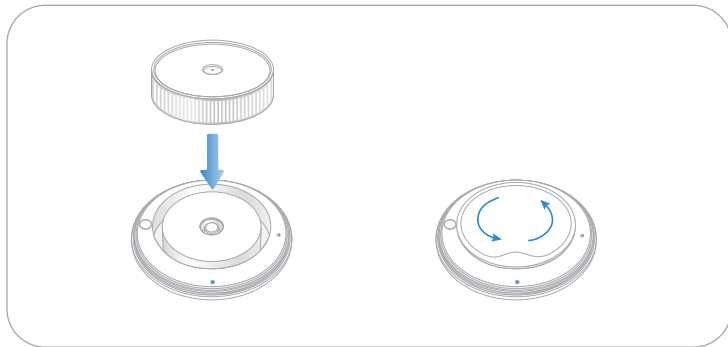

Setup Process and Maintenance | 2. Changing the Cartridge

We advise that you use the pair of protective gloves provided.

We strongly advise you to clean and recharge the U-Scan Reader before changing the cartridge, using the cleaning powder* enclosed with your cartridge, the U-Scan Station and following the in-app tutorial.

EN

3. Cartridge Lifespan

The cartridge can be used for 15 months following the production date, after which it will be expired and therefore no longer usable. You can find the expiration date on your cartridge packaging, on the cartridge sleeve, on the cartridge itself, and on the application after installing the cartridge.

After installing a cartridge, you have a maximum of 3 months to use it. After this date, you will no longer be able to take measurements. You can find this date on the application after installing your cartridge.

If you receive a cartridge that has expired or will expire in less than 3 months, please contact our customer service department to receive a new cartridge. If you store your cartridge for too long, you will not be able to install it after the expiration date, or even run measurements with it.

*Information on the cleaning detergent provided: Tergazyme® Enzyme-Active Powdered Detergent is a concentrated, enzymatic detergent for manual and soak commercial kitchen cleaning.

Unique Formula Identifier (UFI)
OS90-10CR-S00Y-G8GH

Composition/information on ingredients

Chemical name	Weight-%	CAS n°	CE n°
Sodium bicarbonate	45-50	144-55-8	205-633-8
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	10-15	68081-81-2	207-838-8 (011-005-00-2)
Sodium carbonate	7-13	497-19-8	268-356-1
Tetrasodium EDTA	0.1-1	64-02-8	200-573-9 (607-428-00-2)

Warning

Hazard statements

Harmful if swallowed.

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.



Precautionary Statements - Prevention

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product.

Wear protective gloves.

Precautionary Statements - Response

Specific treatment (see information on this label).

Eyes

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice and attention.

Skin

IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap. If skin irritation occurs: Get medical advice and attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Ingestion

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Rinse mouth.

Precautionary Statements - Disposal

Dispose of contents and container according to the local relementation.

Unknown acute toxicity

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Keep out of the reach of children.

Supplier Address

Alconox Inc.
30 Glenn St.,
Suite 309 White Plains,
NY 10603 USA 914-948-4040

Emergency telephone

ChemTel Inc.: North America: 1-888-255-3924
International: +1-813-248-0573

For more information, please check the Safety Data Sheet

<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-USCA-English.pdf>

General information

EN

Technical specifications

Product name: Withings U-Scan Nutrio Cartridge

Model: CWPA01

Dimension: Ø 6,4cm

Weight: 13 grams

Shelf Life in pouch (in specified conditions of storage):
12 months

In-Use-Stability (in specified conditions of operation):
3 months

Number of test strips: 45

Operating Conditions:

- Temperature range: 2°C to 30°C (35,6 to 86°F)
- Humidity range: 10% to 90%
- Keep out from the humidity and sunlight

Water and splash resistant: Please avoid excess water exposure with the cartridge, as this could damage the cartridge.

Storage Conditions:

- Temperature range: 2°C to 30°C (35,6 to 86°F)
- Humidity range: 10% to 90%
- Keep out from the humidity and sunlight

European Union - Declaration of Conformity

Withings hereby declares that the device Withings U-Scan Nutrio Cartridge is in conformity with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations. The full text of the declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance.



? Need help?

→ withings.com/support

Warranty

Withings Fifteen (15) Months Limited Warranty - Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings") warrants the Withings-branded product ("Withings Product") against defects in materials and work-manship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of FIFTEEN (15) MONTHS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include, but are not limited to, information contained in technical specifications, safety instructions or Quick Start Guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

Australia: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Security

Withings recommends that you add a passcode (personal identification number [PIN]), Face ID or Touch ID (fingerprint) to your mobile device as an added layer of security. It is important to secure your phone since it will be storing personal health information. Concerning the Withings U-Scan Reader, users will also receive additional update notifications on the Withings app, and updates are delivered wirelessly, encouraging rapid adoption of the latest security fixes. Users are able to see the currently installed software version in the Withings app, under Devices > U-Scan. This tab also indicates if an update is available.

Do not install the device on a smartphone that you do not own.

Do not use a public Wi-Fi network you are unfamiliar with. Use a trusted Wi-Fi network with your device.

Withings also recommends upgrading your Withings app when an upgrade is available.

The Withings application is not intended to be used on a computer. No indication of anti-virus software is needed.

Only use official app stores to download the Withings companion app. If in doubt, use the link go.withings.com.

EN

Ecological information

After use, the cartridge should be disposed of in general waste following local regulations to avoid any contamination.

EN

Equipment symbol description



Catalog number



Serial Number



Consult instructions for use or consult electronic instructions for use



This product complies with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations



Humidity limitation



Temperature limit



Upper and lower limits of atmospheric pressure



Model Number



Keep away from sunlight



Keep dry



Do not use if the package is damaged and consult instructions for use



Non recyclage content



Use-by date



Health hazard

GUIDE UTILISATEUR

FR – RÉGIONS EUROPE

Contenu

INTRODUCTION	18	INFORMATIONS GÉNÉRALES	26
Remarque importante	18	Caractéristiques techniques	26
		Union européenne - Déclaration de conformité	26
AVERTISSEMENT	18	Garantie	27
À propos de la cartouche Withings U-Scan Nutrio	18	Sécurité	27
Avertissements et consignes de sécurité	19	Description des symboles de l'appareil	28
Performances chimiques	20		
Interférences	20		
LA CARTOUCHE WITHINGS U-SCAN NUTRIO	21		
Vue d'ensemble	21		
Contenu de l'emballage de la cartouche Withings U-Scan Nutrio	21		
Processus de configuration et entretien	22		
1. Installation de la cartouche	22		
2. Remplacement de la cartouche	23		
3. Durée de vie de la cartouche	23		

Introduction

FR

Remarque importante

Merci d'avoir choisi Withings U-Scan. Avant d'utiliser la cartouche Withings U-Scan Nutrio, veuillez prendre connaissance de ce guide. Ce guide est également disponible en ligne sur le site <https://www.withings.com/guides>

Conservez cette documentation à titre d'information. Les instructions d'installation sont disponibles dans le guide de démarrage rapide fourni avec ce guide produit. Veuillez contacter Withings si vous avez besoin d'aide pour configurer, utiliser ou entretenir l'appareil ou pour signaler un fonctionnement ou des événements inattendus.

Pour plus d'informations sur le système Withings U-Scan, veuillez consulter le guide produit du lecteur Withings U-Scan.

Les informations figurant dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Afin d'utiliser votre cartouche Withings U-Scan Nutrio, vous devez disposer d'une tablette ou d'un smartphone iOS (16.0 ou plus) ou Android (9.0 ou plus). L'utilisation d'un appareil mobile est nécessaire pour l'installation du système Withings U-Scan, ainsi que pour la synchronisation et la consultation des résultats.

À propos du système Withings U-Scan

La cartouche Withings U-Scan Nutrio est un composant du système Withings U-Scan, qui se compose d'une application (Withings App), d'un lecteur et d'un consommable (Cartouche). Ce système analyse l'évolution de certains paramètres urinaires (pH, cétones, vitamine C et densité urinaire) afin de vous fournir des recommandations personnalisées en matière de nutrition et d'activités sportives.

Pour utiliser le système Withings U-Scan, vous devez disposer du lecteur Withings U-Scan ainsi que d'une cartouche Withings U-Scan Nutrio. Si vous avez des questions concernant l'installation, l'entretien ou l'utilisation du lecteur Withings U-Scan, veuillez consulter son manuel d'utilisation.

Avertissement

À propos de la cartouche Withings U-Scan Nutrio

La cartouche Withings U-Scan Nutrio est un composant du système Withings U-Scan composé d'une application (Withings), d'un lecteur et d'un consommable (cartouche) qui utilise l'évolution de certains paramètres urinaires (pH, cétones, vitamine C et gravité spécifique) pour vous fournir des recommandations personnalisées en termes de nutrition et d'activités sportives.

Avertissement

Avertissements et consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation. La cartouche Withings Nutrio n'est pas un dispositif médical et n'est pas destinée à être utilisée pour le diagnostic, le traitement ou le suivi d'une maladie ou d'une affection. L'auto-diagnostic et l'auto-traitement peuvent s'avérer dangereux. Consultez toujours votre médecin en cas de questions ou de doutes.

● Les mesures de pH de U-Scan Nutrio ne peuvent être utilisées qu'à des fins de suivi personnel. Elles ne peuvent pas être utilisées pour le diagnostic de maladies ou de conditions médicales, y compris la déshydratation clinique, les maladies rénales, le diabète, les carences ou toute autre maladie ou condition. Les mesures de pH de U-Scan Nutrio ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou les consultations avec un médecin, et sont uniquement conçues à des fins de fitness et de bien-être général.

● Les mesures de gravité spécifique de U-Scan Nutrio ne peuvent être utilisées qu'à des fins de suivi personnel. Elles ne peuvent pas être utilisées pour le diagnostic de maladies ou de conditions médicales, y compris la déshydratation clinique, les maladies rénales, le diabète, les carences ou toute autre maladie ou condition. Les mesures de gravité spécifique de U-Scan Nutrio ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou les consultations avec un médecin, et sont uniquement conçues à des fins de fitness et de bien-être général. Si vous suspectez une déshydratation clinique, veuillez

consulter votre professionnel de santé, car U-Scan Nutrio n'est pas un outil de diagnostic pour évaluer l'état d'hydratation clinique.

● Les mesures de vitamine C de U-Scan Nutrio ne peuvent être utilisées qu'à des fins de suivi personnel. Elles ne peuvent pas être utilisées pour le diagnostic de maladies ou de conditions médicales, y compris la déshydratation clinique, les maladies rénales, le diabète, les carences ou toute autre maladie ou condition. Les mesures de vitamine C de U-Scan Nutrio ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou les consultations avec un médecin, et sont uniquement conçues à des fins de fitness et de bien-être général.

● Les niveaux de cétones mesurés par U-Scan Nutrio ne peuvent être utilisés qu'à des fins de suivi personnel. Ils ne peuvent pas être utilisés pour le diagnostic de maladies ou de conditions médicales, y compris la déshydratation clinique, les maladies rénales, le diabète, les carences ou toute autre maladie ou condition. Les mesures de cétones de U-Scan Nutrio ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou les consultations avec un médecin, et sont uniquement conçues à des fins de fitness et de bien-être général.

● Les cartouches Withings U-Scan Nutrio sont uniquement compatibles avec le lecteur Withings U-Scan.

● Les données communiquées le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les méthodes de diagnostic traditionnelles.

● Cette cartouche est réservée aux adultes.

FR

- Les échantillons destinés à être utilisés avec les cartouches Withings U-Scan Nutrio sont exclusivement de l'urine humaine.

- N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que l'emballage est endommagé ou fissuré. L'utilisation d'un produit endommagé peut provoquer des blessures ou une défaillance matérielle.

- Respectez les conditions de fonctionnement et de stockage décrites dans la rubrique relative aux caractéristiques techniques de ce manuel car la précision des mesures en dépend.

- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux qui ne figurent pas dans ce guide.

- Certaines substances ou apports peuvent altérer la précision des résultats. Pour plus d'informations, consultez la partie de ce manuel consacrée aux molécules interférentes.

- Jetez les cartouches Withings U-Scan 90 jours après leur ouverture.

- N'installez pas et n'utilisez pas les cartouches Withings U-Scan après la date de péremption. Vérifiez la date de péremption sur le sachet en aluminium de la cartouche ou sur la boîte d'emballage de la cartouche.

- N'exposez pas la cartouche Withings U-Scan Nutrio à l'humidité.

- Un détergent est fourni dans l'emballage de la cartouche. Veuillez vérifier les consignes de sécurité avant de l'utiliser.

- Le détergent est uniquement destiné à être utilisé avec la station U-Scan.

- Ne pas utiliser ce produit pendant les menstruations ou si vous avez du sang dans les urines.

Performances chimiques Vous pouvez retrouver les performances chimiques de la cartouche Nutrio sur ce lien :

<https://support.withings.com/hc/articles/27579993272849>

Interférences

La consommation des substances exogènes suivantes peut entraîner des résultats faussement positifs pour la vitamine C et/ou les cétones en raison de leur forte pigmentation. La phénazopyridine, le captopril et la riboflavine ont tendance à surestimer les niveaux de vitamine C, tandis que le captopril et la nitrofurantoïne peuvent entraîner une surestimation des niveaux de cétones.


En cas de comportements connus pour augmenter la créatinine, la bilirubine ou la concentration sanguine dans les urines, U-Scan ne doit pas être utilisé, car les résultats ne seront pas précis. Cela inclut les menstruations et les entraînements intensifs entraînant un gain musculaire extrême. Des valeurs de pH supérieures à 7,5 peuvent entraîner une sous-estimation du niveau d'apport hydrique. L'acide acétique, l'acide citrique et l'hypochlorite de sodium ne doivent jamais être utilisés pour nettoyer le lecteur U-Scan. S'ils sont utilisés pour nettoyer la cuvette des toilettes, celle-ci doit être soigneusement rincée à l'eau avant de remettre le lecteur U-Scan en place.

La cartouche Withings U-Scan Nutrio | Vue d'ensemble

Contenu de l'emballage de la cartouche Withings U-Scan Nutrio.

L'emballage de la cartouche Withings U-Scan Nutrio comprend les éléments suivants. Si un élément est manquant, veuillez nous contacter à l'adresse support.withings.com

WITHINGS U-SCAN CARTOUCHE Contenu de la boîte

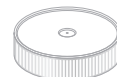

Withings U-Scan Cartouche



Gants protecteurs



Poudre détergente



Guide utilisateur




Processus de configuration et entretien

1. Installation de la cartouche

FR

Pour installer la cartouche, vous pouvez lancer le processus d'installation de la cartouche à partir de votre application et suivre les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre lecteur Withings U-Scan est ouvert.
2. Retirez la cartouche Withings U-Scan Nutrio de son emballage et insérez-la dans le lecteur.
3. Tout en appuyant délicatement, tournez la cartouche dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche dans le lecteur.
4. Le témoin lumineux passe du bleu au vert pour confirmer que la cartouche a été activée.
5. Pour fermer l'appareil, tenez-le dans votre paume en maintenant le côté lisse vers le haut et placez le couvercle par-dessus. Tournez le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre. La cartouche Withings U-Scan Nutrio est désormais correctement installée dans le lecteur.

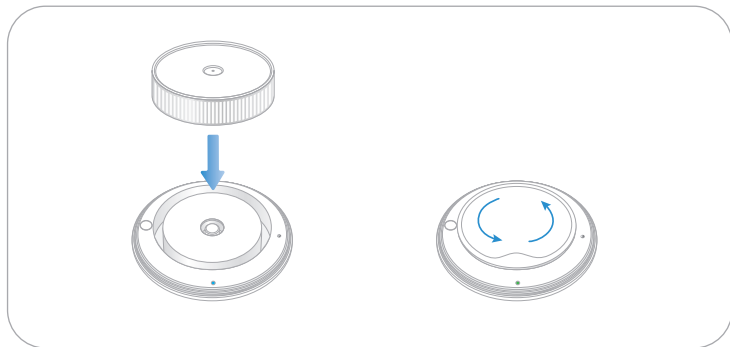

Processus de configuration et entretien |

2. Remplacement de la cartouche

FR

Nous vous recommandons d'utiliser la paire de gants de protection fournie.

Nous vous conseillons fortement d'effectuer un nettoyage et de recharger le lecteur Withings U-Scan avant de changer la cartouche, en utilisant la poudre de nettoyage* fournie avec votre cartouche, ainsi que la station U-Scan, et en suivant le tutoriel disponible dans l'application.

3. Durée de vie de la cartouche

La cartouche peut être utilisée pendant 15 mois à compter de la date de production, après quoi elle sera périmée et donc inutilisable. La date de péremption figure sur l'emballage de la cartouche, sur le sachet de la cartouche, sur la cartouche elle-même et sur l'application après l'installation de la cartouche.

Après l'installation d'une cartouche, vous disposez d'un maximum de 3 mois pour l'utiliser. Passé ce délai, vous ne pourrez plus effectuer de mesures. Vous trouverez cette date sur l'application après l'installation de votre cartouche.

Si vous recevez une cartouche périmée ou dont la date de péremption est inférieure à 3 mois, veuillez contacter notre service clientèle pour recevoir une nouvelle cartouche. Si vous conservez votre cartouche trop longtemps, vous ne pourrez plus l'installer après la date de péremption, ni même effectuer des mesures avec celle-ci.

* Informations relatives au détergent fourni : Le détergent en poudre à action enzymatique Tergazyme® est un détergent enzymatique concentré destiné au nettoyage manuel et par trempage des cuisines commerciales.

Identifiant unique de formulation (UFI)
0S90-10CR-S00Y-G8GH

Composition/informations sur les ingrédients

Nom chimique	Poids, en %	N° CAS	N° CE
Bicarbonate de sodium	45 à 50	144-55-8	205-633-8
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyl en C10-16, sels de sodium	10 à 15	68081-81-2	207-838-8 (011-005-00-2)
Carbonate de sodium	7 à 13	497-19-8	268-356-1
EDTA tétrasodique	0,1 à 1	64-02-8	200-573-9 (607-428-00-2)

Avvertissement

Mentions de danger

Nocif en cas d'ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.



Mises en garde — Prévention

Se laver soigneusement le visage, les mains et toute zone de peau exposée après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Porter des gants de protection.

Mises en garde — Intervention

Traitement spécifique (voir les informations figurant sur cette étiquette).

Yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Retirer tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Ingestion

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

Mises en garde — Élimination

Éliminer les contenus et les contenants conformément aux réglementations locales.

Toxicité aiguë inconnue

Conserver les contenants hermétiquement fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants.

Adresse du fournisseur

Alconox Inc.
30 Glenn St.,
Suite 309 White Plains,
NY 10603 USA 914-948-4040

Numéro d'urgence

ChemTel Inc. : Amérique du Nord : 1-888-255-3924 International : +1-813-248-0573

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-USCA-English.pdf>
<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-EU-French.pdf>

Informations générales

FR

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Cartouche Withings U-Scan Nutrio

Modèle : CWP001

Dimensions : Ø 6,4 cm

Poids : 13 gr

Durée de conservation dans le sachet (dans les conditions de stockage spécifiées) : 12 mois

Stabilité en cours d'utilisation (dans les conditions de fonctionnement spécifiées) : 3 mois

Nombre de bandelettes de test : 45

Conditions d'utilisation :

- Plage de température : 2 °C à 30 °C
- Plage d'humidité : 10 % à 90 %
- Tenir à l'écart de l'humidité et de la lumière du soleil

Résistant à l'eau et aux éclaboussures : Veuillez éviter une exposition excessive à l'eau avec la cartouche, car cela pourrait l'endommager

Conditions de stockage :

- Plage de température : 2 °C à 30 °C
- Plage d'humidité : 10 % à 90 %
- Tenir à l'écart de l'humidité et de la lumière du soleil

Union européenne — Déclaration de conformité

Withings déclare par la présente que la cartouche Withings U-Scan Nutrio est conforme aux exigences essentielles des directives et règlements européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : withings.com/compliance.



? Need help?

→ withings.com/support

FR

Garantie

Garantie commerciale de Withings limitée à quinze (15) mois — Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Withings ») garantit le produit physique de marque Withings (« Produit Withings ») contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé normalement, conformément aux directives publiées par Withings pendant une période de QUINZE (15) MOIS à compter de la date d'achat initiale par l'acheteur-utilisateur final (« Période de garantie »). Les directives publiées par Withings comprennent, sans toutefois s'y limiter, les informations figurant dans les caractéristiques techniques, les consignes de sécurité ou le guide de démarrage rapide. Withings ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Withings sera exempt d'interruptions ou d'erreurs. Withings n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du Produit Withings.

Australie : Nos produits sont commercialisés avec des garanties qui ne peuvent être exclues du cadre du droit des consommateurs australien. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de panne majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit d'obtenir la réparation ou le remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne relève pas d'une défaillance majeure.

Sécurité

Withings vous recommande d'ajouter un code d'accès (numéro d'identification personnelle [PIN]), Face ID ou Touch ID (empreinte digitale) à votre appareil mobile pour une protection supplémentaire. Il est important de sécuriser votre téléphone, car vous allez y stocker des informations de santé personnelles. A propos du Withings U-Scan Lecteur, les utilisateurs recevront également des notifications de mise à jour supplémentaires sur l'application Withings ; les mises à jour sont fournies sans fil, ce qui facilite l'ajout rapide des derniers correctifs de sécurité. Les utilisateurs peuvent consulter la version actuelle du logiciel installé dans l'appli Withings en se rendant dans Appareils (Devices) > U-Scan. Cet onglet indique également si une mise à jour est disponible.

N'installez pas l'appareil sur un smartphone dont vous n'êtes pas le propriétaire.

N'utilisez pas un réseau Wi-Fi public que vous ne connaissez pas. Utilisez un réseau Wi-Fi de confiance avec votre appareil.

Withings recommande également de mettre à niveau votre application Withings lorsqu'une mise à jour est disponible.

L'application Withings n'est pas destinée à être utilisée sur un ordinateur. Aucun logiciel antivirus n'est nécessaire.

Utilisez uniquement les boutiques d'applications officielles pour télécharger l'appli Withings. En cas de doute, veuillez utiliser le lien go.withings.com.

Informations écologiques

Après utilisation, la cartouche doit être éliminée avec les ordures ménagères, conformément aux réglementations locales, afin d'éviter toute contamination.

FR

FR

Description des symboles de l'appareil

	Référence
	Numéro de série
	Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique
	Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables.
	Limite d'humidité
	Limite de température
	Limites supérieure et inférieure de la pression atmosphérique
	Numéro de modèle
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Conserver au sec
	Né pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
	Contenu non recyclable
	Date limite d'utilisation
	Risque pour la santé

BENUTZENHANDBUCH

DE - REGIONEN EUROPAS

Inhalte

EINLEITUNG	31	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	40
Wichtiger Hinweis	31	Technische Spezifikationen	40
		Europäische Union – Konformitätserklärung	40
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	31	Garantie	41
Über die Withings U-Scan Nutrio-Kartusche	31	Sicherheit	41
Warn- und Sicherheitshinweise	31	Beschreibung der Gerätesymbole	42
Chemische Leistung	34		
Interferenzen	34		
ÜBER DIE WITHINGS U-SCAN NUTRIO-KARTUSCHE	35		
Überblick	35		
Inhalt der Verpackung der Withings U-Scan Nutrio-Kartusche	35		
Einrichtung	36		
1. Installation der Kartusche	36		
2. Wechseln der Kartusche	37		
3. Lebensdauer der Kartusche	37		

Einleitung

Wichtiger Hinweis

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Withings U-Scan entschieden haben. Lesen Sie sich vor der Verwendung der Withings U-Scan Nutrio-Kartusche die Informationen in dieser Anleitung durch. Diese Anleitung finden Sie auch online unter <https://www.withings.com/guides>. Bewahren Sie diese Unterlagen zum späteren Nachlesen auf. Die Installationsanweisungen finden Sie in der Schnellstartanleitung, die diesem Produktleifaden beiliegt. Bitte kontaktieren Sie Withings, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des Geräts benötigen oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse melden möchten.

Weitere Informationen zum Withings U-Scan System finden Sie im Produkthandbuch für das Lesegerät Withings U-Scan Reader.

Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie benötigen ein Tablet oder Smartphone mit iOS (16.0 oder höher) oder Android (9.0 und höher), um Ihre Withings U-Scan Nutrio-Patrone zu installieren. Es ist zwar möglich, eine Messung ohne ein mobiles Gerät zu starten, für die Installation des Withings U-Scan-Systems sowie für die Synchronisierung und Abfrage Ihrer Ergebnisse ist jedoch ein mobiles Gerät erforderlich. Es ist zwar möglich, eine Messung ohne ein mobiles Gerät zu starten, für die Installation des Withings U-Scan-Systems sowie für die Synchronisierung und Abfrage Ihrer Ergebnisse ist jedoch ein mobiles Gerät erforderlich.

Haftungsausschluss

Über die Withings U-Scan Nutrio-Kartusche

Die Withings U-Scan Nutrio Kartusche ist ein Bestandteil des Withings U-Scan Systems, das aus einer Anwendung (Withings App), einem Lesegerät (Reader) und einem Verbrauchsmaterial (Kartusche) besteht. Dieses System analysiert die Entwicklung bestimmter Urinparameter (pH-Wert, Ketone, Vitamin C und spezifisches Gewicht), um Ihnen personalisierte Empfehlungen in Bezug auf Ernährung und sportliche Aktivitäten zu geben. Um das Withings U-Scan System zu nutzen, benötigen Sie den Withings U-Scan Reader (Lesegerät) sowie eine Withings U-Scan Nutrio Kartusche.

Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch vor Anwendung dieses Geräts aufmerksam durch.

Die Withings Nutrio-Kartusche ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Diagnose, Behandlung oder Überwachung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden vorgesehen. Selbstdiagnose und Selbstbehandlung können gefährlich sein. Bei Fragen oder im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte immer an Ihren Arzt.

● Die pH-Werte des U-Scan Nutrio können nur für persönliche Selbstverfolgungszwecke verwendet werden. Sie dürfen nicht zur Diagnose von Krankheiten oder Zuständen verwendet werden, einschließlich klinischer Dehydratation, Nieren-

krankungen, Diabetes, Mangelerscheinungen oder anderen Krankheiten und Zuständen. Die pH-Messungen des U-Scan Nutrio sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt, einschließlich Selbstdiagnose oder Konsultation eines Arztes, und sind ausschließlich für allgemeine Fitness- und Wellness-Zwecke konzipiert.

● Die spezifischen Gewichtsmessungen des U-Scan Nutrio können nur für persönliche Selbstverfolgungszwecke verwendet werden. Sie dürfen nicht zur Diagnose von Krankheiten oder Zuständen verwendet werden, einschließlich klinischer Dehydratation, Nierenkrankungen, Diabetes, Mangelerscheinungen oder anderen Krankheiten und Zuständen. Die Messungen des spezifischen Gewichts des U-Scan Nutrio sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt, einschließlich Selbstdiagnose oder Konsultation eines Arztes, und sind ausschließlich für allgemeine Fitness- und Wellness-Zwecke konzipiert. Wenn Sie den Verdacht auf eine klinische Dehydratation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, da der U-Scan Nutrio kein Diagnose-Setool für den klinischen Hydrationsstatus ist.

● Die Vitamin-C-Messungen des U-Scan Nutrio können nur für persönliche Selbstverfolgungszwecke verwendet werden. Sie dürfen nicht zur Diagnose von Krankheiten oder Zuständen verwendet werden, einschließlich klinischer Dehydratation, Nierenkrankungen, Diabetes, Mangelerscheinungen oder anderen Krankheiten und Zuständen. Die Vitamin-C-Messungen des U-Scan Nutrio sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt, einschließlich Selbstdiagnose oder Konsultation eines Arztes, und sind ausschließlich für allgemeine Fitness- und Wellness-Zwecke konzipiert.

Arztes, und sind ausschließlich für allgemeine Fitness- und Wellness-Zwecke konzipiert.

● Die Ketonwerte des U-Scan Nutrio können nur für persönliche Selbstverfolgungszwecke verwendet werden. Sie dürfen nicht zur Diagnose von Krankheiten oder Zuständen verwendet werden, einschließlich klinischer Dehydratation, Nierenkrankungen, Diabetes, Mangelerscheinungen oder anderen Krankheiten und Zuständen. Die Ketonmessungen des U-Scan Nutrio sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt, einschließlich Selbstdiagnose oder Konsultation eines Arztes, und sind ausschließlich für allgemeine Fitness- und Wellness-Zwecke konzipiert.

● Withings U-Scan Nutrio-Patrone sind nur mit dem Withings U-Scan-Lesegerät kompatibel.

● Die bereitgestellten Daten dienen ausschließlich zur Informationszwecken und sind nicht als Ersatz für herkömmliche Diagnosemethoden gedacht.

● Diese Patrone ist nur für Erwachsene bestimmt.

● Für die Withings U-Scan Nutrio-Patrone darf ausschließlich menschlicher Urin verwendet werden.

● Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass die Verpackung beschädigt/gerissen ist. Die Verwendung eines beschädigten Produkts kann zu Verletzungen oder Geräteausfällen führen.

● Befolgen Sie die im Abschnitt „Technische Daten“ dieser Anleitung angegebenen Bedingungen für Betrieb und Lagerung. Andernfalls kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.

● Verwenden Sie kein Zubehör, keine abnehmbaren Teile oder Materialien, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

DE

- Bestimmte Stoffe können die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Störende Substanzen“ in diesem.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während der Menstruation oder wenn sich Blut im Urin befindet.

Chemische Leistung

Bitte überprüfen Sie die Leistung auf unserer Website mit diesem Link:

<https://support.withings.com/hc/articles/27579993272849>

Interferenzen

Der Konsum der folgenden exogenen Substanzen kann aufgrund ihrer starken Pigmentierung zu falsch positiven Ergebnissen für Vitamin C und/oder Ketone führen. Phenazopyridin, Captopril und Riboflavin neigen dazu, den Vitamin-C-Wert zu überschätzen, während Captopril und Nitrofurantoin zu einer Überschätzung der Ketonwerte führen können.

Bei Verhaltensweisen, die bekanntermaßen den Kreatinin-, Bilirubin- oder Blutgehalt im Urin erhöhen, sollte U-Scan nicht verwendet werden, da die Ergebnisse ungenau sein werden. Dazu gehören Menstruation und intensive Workouts, die zu einem extremen Muskelzuwachs führen.

pH-Werte über 7,5 können zu einer Unterschätzung der Flüssigkeitsaufnahme führen.

Essigsäure, Zitronensäure und Natriumhypochlorit sollten niemals verwendet werden, um das U-Scan-Lesegerät zu reinigen. Wenn sie zur Reinigung der Toilettenschüssel verwendet werden, sollte diese gründlich mit Wasser abgespült werden, bevor das U-Scan-Lesegerät wieder eingesetzt wird.

Über die Withings U-Scan Nutrio-Kartusche | Überblick

Inhalt der Verpackung der Withings U-Scan Nutrio-Kartusche

Die Verpackung der Withings U-Scan Nutrio-Patrone enthält die folgenden Teile. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte unter support.withings.com.

U-SCAN KARTUSCHE LIEFERUMFANG



Withings U-Scan Kartusche



Schutzhandschuhe



Reinigungspulver



Produkthandbuch




Einrichtung

1. Installation der Kartusche

DE

Um die Patrone zu installieren, starten Sie den Installationsvorgang der Patrone über Ihre App und befolgen Sie diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Withings U-Scan-Lesegerät geöffnet ist.
2. Nehmen Sie Ihre Withings U-Scan Nutrio-Patrone aus der Verpackung und setzen Sie die Patrone in das Lesegerät ein.
3. Drücken Sie die Kartusche vorsichtig nach unten und drehen Sie sie in eine beliebige Richtung, bis sie spürbar im Lesegerät einrastet. Element mit folgendem Bild hochladen.
4. Die Kontrollleuchte wechselt von Blau zu Grün, um zu bestätigen, dass die Patrone aktiviert wurde.
5. Um das Gerät zu schließen, halten Sie es mit der glatten Seite nach oben in Ihrer Handfläche und drehen Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn. Die Withings U-Scan Nutrio-Patrone ist nun ordnungsgemäß im Lesegerät installiert.

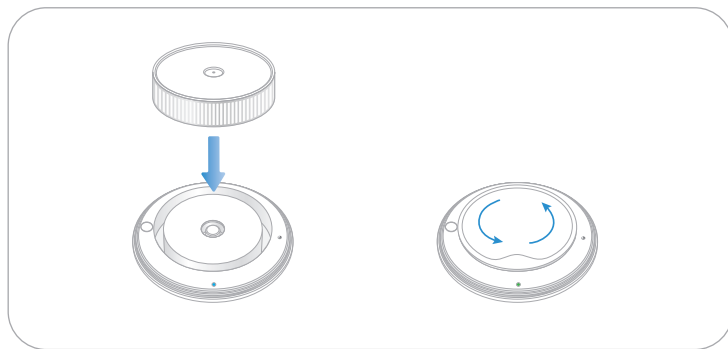

2. Welchsen der Kartusche

Wir empfehlen Ihnen, das mitgelieferte Paar Schutzhandschuhe zu verwenden.

Wir raten dringend dazu, Withings U-Scan Reader vor dem Wechsel der Kartusche gründlich zu reinigen und aufzuladen. Verwenden Sie dazu das Reinigungspulver*, das Ihrer Kartusche beiliegt, sowie die U-Scan Station, und folgen Sie dem Tutorial in der App.

DE

3. Lebensdauer der Kartusche

Die Kartusche kann ab dem Produktionsdatum 15 Monate lang verwendet werden. Danach ist sie abgelaufen und kann nicht mehr verwendet werden. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung der Kartusche, auf dem Kartuschenbeutel, auf der Kartusche selbst und nach dem Einsetzen der Kartusche in der App.

Nach dem Einsetzen einer Kartusche können Sie diese maximal 3 Monate lang benutzen. Danach lassen sich keine Messungen mehr durchführen. Dieses Datum finden Sie nach dem Einsetzen Ihrer Kartusche in der App.

Wenn Sie eine Kartusche erhalten, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder in weniger als 3 Monaten abläuft, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine neue Kartusche zu erhalten. Wenn Sie Ihre Kartusche zu lange lagern, können Sie sie nach dem Ablaufdatum nicht mehr installieren oder damit Messungen durchführen.

* Informationen zum bereitgestellten Reinigungsmittel: Das enzymaktive Reinigungsmittel Tergazyme® in Pulverform ist ein konzentriertes, enzymatisches Reinigungsmittel für die manuelle und die kommerzielle Nassreinigung in Großküchen.

Unique Formula Identifier (UFI)
OS90-10CR-S00Y-G8GH

Zusammensetzung/Informationen zu den Inhaltsstoffen

Chemischer Name	Gewicht %	CAS-Nr.	CE-Nr.
Natriumbikarbonat	45–50	144-55-8	205-633-8
Benzolsulfonsäure, Mono-C10-16-alkyl-derivate, Natriumsalze	10–15	68081-81-2	207-838-8 (011-005-00-2)
Natriumcarbonat	7–13	497-19-8	268-356-1
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)	0,1–1	64-02-8	200-573-9 (607-428-00-2)

Warnung

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.



Sicherheitshinweise – Prävention

Nach Gebrauch Gesicht, Hände und betroffene Hautstellen gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe tragen.

Sicherheitshinweise – Reaktion

Besondere Behandlung (siehe Informationen auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Augen

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haut

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Verschlucken

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFT-INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Mund ausspülen.

Sicherheitshinweise – Entsorgung

Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unbekannte akute Toxizität

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lieferantenadresse

Alconox Inc.
30 Glenn St.,
Suite 309 White Plains,
NY 10603 USA 914-948-4040

Notrufnummer

ChemTel Inc.: Nordamerika: 1-888-255-3924
International: +1-813-248-0573

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt

<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-EU-German.pdf>

Allgemeine Informationen

Technische Spezifikationen

DE

Produktname : Withings U-Scan Nutrio-Patrone

Modell : CWPAA01

Abmessungen : Ø 6,4 cm

Gewicht : 13 gr

Haltbarkeit im Beutel (unter den angegebenen Lagerbedingungen) : 12 Monate

Haltbarkeit während des Gebrauchs (unter den angegebenen Betriebsbedingungen) : 3 Monate

Anzahl der Teststreifen : 45

Betriebsbedingungen :

- Temperaturbereich: 2 °C bis 30 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 90 %
- Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen

Vor Wasser und Spritzwasser schützen : Bitte vermeiden Sie eine übermäßige Wassereinwirkung auf die Patrone, da dies die Patrone beschädigen könnte.

Lagerbedingungen :

- Temperaturbereich: 2 °C bis 30 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 90 %
- Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen

Europäische Union – Konformitätserklärung

Withings erklärt hiermit, dass das Gerät Withings U-Scan Nutrio-Patrone mit den wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter withings.com/compliance.



? Need help?

➔ withings.com/support

Garantie

Eingeschränkte Fünfzehn-Monate-Garantie (15) Garantie von Withings – Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (nachfolgend „Withings“ genannt) gewährt eine Garantie auf Geräte der Marke Withings (nachfolgend „Withings-Produkt“ genannt) im Falle von Material- und Verarbeitungsfehlern, die bei zweckmäßigem Gebrauch gemäß der von Withings veröffentlichten Bedienungsanleitung innerhalb eines Zeitraums von FÜNFZEHN (15) MONATE ab dem Datum des ursprünglichen Kaufbelegs des Erstnutzers (nachfolgend „Gewährleistungsfrist“ genannt) auftreten. Die von Withings veröffentlichte Bedienungsanleitung enthält u. a. die technischen Spezifikationen, Sicherheitshinweise sowie eine Schnellstartanleitung. Withings übernimmt keine Haftung für einen ununterbrochenen oder störungsfreien Betrieb des Withing-Produkts. Withings ist nicht für Schäden verantwortlich, die aus der Nichtbefolgung der Gebrauchsanweisung für das Withings Produkt entstehen.

Australien : Unsere Artikel haben eine Garantie, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden darf. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Fehler und auf Entschädigung für jeden anderen angemessenen Verlust oder Schaden. Sie haben außerdem Anspruch auf die Reparatur oder den Ersatz eines Artikels, wenn dieser Qualitätsmängel aufweist und der Fehler keinen groben Mangel darstellt.

Sicherheit

Withings empfiehlt Ihnen, Ihrem Mobilgerät einen Passcode (persönliche Identifikationsnummer [PIN]), eine Gesicht-ID oder eine Touch-ID (Fingerabdruck) hinzuzufügen, um eine zusätzliche Sicherheitsebene einzuführen. Es ist wichtig, Ihr Telefon zu sichern, da Sie persönliche Gesundheitsinformationen speichern werden. Benutzer erhalten außerdem zusätzliche Update-Benachrichtigungen auf dem Gerät über die Withings App und Updates werden drahtlos bereitgestellt, was die rasche Übernahme der neuesten Sicherheitsupdates fördert. Benutzer können die aktuell installierte Softwareversion in der Withings App unter Geräte (Devices) > U-Scan einsehen. Diese Registerkarte zeigt außerdem an, ob ein Update verfügbar ist.

Installieren Sie das Gerät nicht auf einem Smartphone, das nicht Ihr Eigentum ist.

Verwenden Sie kein öffentliches WLAN-Netzwerk, das Sie nicht kennen. Verwenden Sie ein vertrauenswürdiges WLAN-Netzwerk mit Ihrem Gerät.

Withings empfiehlt außerdem ein Upgrade Ihrer Withings App, sobald eines verfügbar ist.

Die Withings-Anwendung ist nicht für die Verwendung auf einem Computer bestimmt. Es ist kein Hinweis auf eine Antivirensoftware erforderlich.

Verwenden Sie nur offizielle App-Stores, um die Withings Companion App herunterzuladen. Nutzen Sie im Zweifelsfall den Link go.withings.com.

DE

Ökologische Informationen

Entsorgen Sie die Patrone nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften im Restmüll, um jegliche Kontamination zu vermeiden.

DE Beschreibung der Gerätesymbole

	Katalognummer
	Seriennummer
	Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder die elektronischen Anweisungen zur Nutzung
	Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien.
	Feuchtigkeitsgrenzwert
	Temperaturgrenzwert
	Obere und untere Luftdruckgrenze
	Modellnummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Trocken halten
	Nicht verwenden, falls die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht recycelbarer Inhalt
	Mindesthaltbarkeitsdatum
	Gesundheitsrisiko



For online version and translations /
Für Online-Version und Übersetzungen

AW_IFU_CWPA01_ALL_INT_E

WITHINGS

Withings U-Scan System | Proactive Health Tracking

2025 Withings. All rights reserved. Aug. 2025

support.withings.com - 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France