


Smart Temporal Thermometer

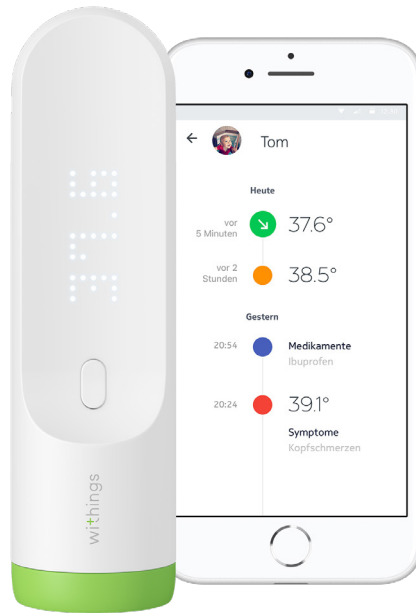

Das WLAN-Schläfenthermometer **Thermo** bietet dank 16 Sensoren die schnellste, genaueste sowie hygienischste Art und Weise, um Fieber zu messen.

Die Messungen werden automatisch mit der dazugehörigen App synchronisiert.

Damit können Nutzer den Fieberverlauf dokumentieren, Erinnerungen setzen sowie auftretende Symptome und die Einnahme von Medikamenten direkt auf dem Smartphone notieren.

Funktionen

Klinische Genauigkeit

Durch Scan der Stirnoberfläche misst Thermo die Temperatur an der Schläfenarterie — die aus medizinischer Sicht optimale Methode zur Erfassung von Temperaturänderungen, weil das hier zirkulierende Blut direkt aus der Körpermitte kommt.

HotSpot Sensor™ Technologie

16 Infrarot-Sensoren ermitteln mit mehr als 4.000 Messungen den heißesten Messpunkt.

Der einfache Scan über die Stirn

erfordert keinen Kontakt mit der Haut. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden vermeidet Thermo jeglichen Kontakt mit Speichel, Ohrenschmalz oder anderen Körperflüssigkeiten und ermöglicht so die hygienischste Form der Temperaturmessung.

Eine leichte Vibration zeigt, wenn die

Messung abgeschlossen ist. Die Messungen werden zusammen mit einem farbcodierten LED-Indikator in beleuchteten Zeichen auf dem Gerät angezeigt. Dort wird basierend auf dem Alter des Nutzers angegeben, ob dieser Normaltemperatur, erhöhte Temperatur oder Fieber hat.

Thermo unterstützt bis zu 8 Nutzer

Die Namen der einzelnen Nutzer erscheinen auf dem Gerät. Sobald die Messung zugeordnet wurde, wird die Temperatur in dem entsprechenden Benutzerprofil der App angezeigt.

Messungen werden automatisch mit der App synchronisiert

Neben der Messung von Fieber, können Nutzer auch Notizen, Medikamente und

sogar Fotos jedem beliebigen Benutzerprofil beifügen. Auf diese Weise wird sichtbar, ob eine Behandlung wirksam ist. Außerdem kann das Protokoll gemeinsam mit dem Arzt eingesehen werden.

Medizinisch zugelassen

Thermo ist durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) freigegeben, trägt das CE-Zeichen und erfüllt so die weltweit höchsten Standards für medizintechnische Geräte.

Technische Fakten

Verfügbar für iOS (iOS 8+) und Android (5.0+)

Anschlussmöglichkeiten: WLAN oder Bluetooth® Smart Ready

Klinische Genauigkeit: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$)

Messbereich: 35°C - 43.2°C (95°F - 109.8°F)

Batterie: 2x AAA

Batterielaufzeit: bis zu 2 Jahre

Preis & Verfügbarkeit

99,95 €

Online

withings.com, amazon.com, otto.de, tink.de

Im Handel

Media Markt, Saturn