


Thermomètre temporal connecté

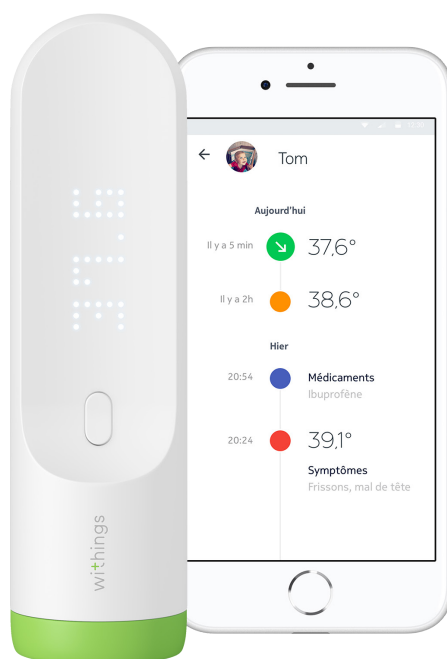

Thermo est une révolution dans l'univers des thermomètres en apportant une solution unique, fiable et simple. Il est muni de 16 capteurs infrarouges prenant la température de l'artère temporale, considérée comme le meilleur endroit pour détecter les variations de température. Grâce à un geste simple, sans contact et en quelques secondes, l'utilisateur obtient une mesure qui se synchronise automatiquement avec son smartphone en Bluetooth ou Wi Fi. L'application dédiée permet d'obtenir des conseils personnalisés, de définir des rappels et de surveiller la santé de toute sa famille.

Fonctionnalités

Précision médicale

Thermo prend la température via l'artère temporale, considérée comme le meilleur endroit pour mesurer les variations de température, car l'influx de sang vient directement du cœur.

Technologie Hot Spot Sensor™

Thermo est équipé de 16 capteurs infrarouges qui fournissent une mesure de haute précision.

Une mesure rapide et pratique

La température est immédiatement affichée sur l'écran de Thermo. Une fois la mesure assignée, un code couleur de vert à rouge vous indique si cette valeur est normale, élevée ou grave - en fonction de l'âge de la personne concernée.

Thermo peut être utilisé par toute la famille

Vous pouvez créer jusqu'à 8 utilisateurs différents et assigner la température à la bonne personne grâce à un écran tactile sur l'appareil.

Les mesures se synchronisent

automatiquement en Wi-Fi ou Bluetooth

avec l'application Thermo. En fonction de la durée de la fièvre et des symptômes que vous déclarez, Thermo vous donne une interprétation et des premiers conseils pour traiter la fièvre.

En plus d'y entrer d'éventuels symptômes, il est possible d'ajouter les médicaments administrés et prendre des notes ou des photos.

Une vue complète de l'épisode de fièvre est alors disponible sur l'application.

Certifié FDA & CE

Thermo a reçu l'autorisation de mise sur le marché par la Food and Drugs Administration (FDA) américaine et se conforme aux réglementations européennes des appareils médicaux.

Spécifications Techniques & Design

Compatible iOS (iOS 8 et plus récent)
et Android (5.0 et plus récent)

Inclus un capuchon de protection

Connectivité Wi-Fi ou Bluetooth

Précision clinique $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$)

Plage de mesure: 35°C - $43,2^{\circ}\text{C}$ (95°F - $109,8^{\circ}\text{F}$)

2 piles AAA (déjà installées)

Durée de vie de la batterie: jusqu'à 2 ans

Prix & Disponibilité

99.95 €

En ligne

amazon.fr

En magasin

Fnac et Darty